

Fuß DETOKS Gerät

MODEL: C01

Marke: SINICA

Bedienungsanleitung

**NICHT GEEIGNET FÜR
SCHWANGERE UND
PERSONEN, DIE EINEN
HERZSCHRITTMACHER HABEN**

Vorstellung



Als erstes legen Sie den Behälter mit einer Folie aus (einige sind mitgeliefert). Das Netzteil mit Strom verbinden. Den Elektrod-Stab (einmal) und Armband am Gerät anbringen.

Dann füllen Sie den gelieferten Behälter mit Wasser auf. Den Armband am rechten Handgelenk anlegen, so dass der Knopf oben liegt. Hinterher legen Sie den Elektrod-Stab und die Füße in das Wasserbad, und schalten das Gerät ein (ON/OFF Taste).

1. Start/Stop Taste drücken
2. Mode Taste drücken. Stellen Sie Mode ein , später kann man ändern.
3. Die Uhr (Time) erscheint 30 Min, man kann es auch weniger einstellen
4. Work voltage ist 12 V
5. Current voltage ändert sich 0,9 etc
6. Mit dem Armband ist ein kleiner Löffel vorhanden.
In der Menge Salz in dem Wasserbad schütten

Die Füße werden massiert. Die in den Zellen vorhandenen Toxoide (Giftoffe) werden durch die Fußkanäle (mehr als 4000 vorhanden) frei gesetzt.
Nur in 30 Minuten wird der Körper gereinigt.

Mit diesem Verfahren werden die abgesetzten Toxoide, die inden Zellwänden gespeichert werden, gereinigt. Sie sollten diese Reinigung 14 Male hintereinander durchführen. Jeweils ein Mal am Tage, und insgesamt in 14 Tagen.
Wenn Sie so eine Sitzung 3 oder 4 Male im Jahr duchführen, ist es nützlich.

Diese Methode wird verwendet, um die körperliche und geistige Energie zu steigern. Dabei wird der Körper entgiftet, die in den Zellen vorhandenen Toxine werden freigesetzt.

1. Sie erreichen ohne Nebenwirkungen eine sichere und wirksame Behandlung.
2. Ihr Stoffwechsel und Immunsystem werden verstärkt. Immunsystem erhöht die Widerstandsfähigkeit des Körpers, wodurch das Risiko von Infektionen gemindert wird. Das Blut kann sich erneuern.
3. Ihr Gedächtnis wird gestärkt, Blasenkontrolle wird erleichtert, der PH-Wert des Körpers ist ausgeglichen. Rückenschmerzen, Rheuma und andere Schmerzen werden gemindert.
4. Blutzucker, Cholesterin und Blutdruck können gesenkt werden. Arthritis, Gicht und Rheumatismus kann leicht nachgewiesen werden.
5. Am Körper wird weniger Wasser angesammelt, somit wird das Gewicht leichter kontrolliert. Es kann Haarausfall reduzieren, hilft Akne und Hautprobleme zu beseitigen.
6. Sie können das Hormonsystem durch negative Ionen ausgleichen, wodurch alle Systeme und Organe normalisiert werden, stellt somit ein Gesundheitsschild auf.

Kurzanleitung

Anfang einer Detox-Therapie

1. Legen Sie bitte einen Plastikbeutel (einige Beutel mit der Ware) in den Eimer aus, damit Sie den Eimer leichter säubern können. Befüllen Sie den Eimer mit warmem Wasser bis zu der Ebene des schwarzen Ionisators.
2. Stecken Sie den Stecker des Ionisators (Elektrod) vorne auf den vorgesehenen Steckplatz (rechts außen) auf dem Eimer. Den Ionisator-Rohr in den Eimer setzen. Achten Sie darauf, dass die Ionisator-Spule vollständig unter Wasser sich befindet.
3. Verbinden Sie das Netzkabel am Gerät und an der Steckdose.
4. Legen Sie bitte Ihre Füße in das Wasser und schalten das Gerät mit der roten Taste.
5. Drücken Sie die Starttaste und wählen Sie den Modus, die Sie ausführen möchten. Bei der ersten Anwendung können Sie z.B. Nr. 1 einstellen. Das Gerät zeigt automatisch 30 Minuten die Dauer der Therapie.
6. Sie können die Therapiezeit mit den Tasten - / + einstellen. Die maximale Laufzeit beträgt 60 Minuten. Die empfohlene Erwachsenenzeit beträgt 30 Minuten.

7. Prüfen Sie die Ampere-Wert auf dem Bildschirm. Es sollte nicht unter 2,8 sein. Sie sollten durch Zugabe von Salz (z.B. Meersalz) einen Wert 2,80 bis 4,00 erreichen.

8. Rühren Sie bei der Einstellung der Stromstärke das Salz mit dem Ionisator im Wasser. Kontrollieren Sie die Amper-Stärke am Display.
Verwenden Sie wenig Salz, damit Sie den Ioninsator für längere Zeit nutzen können.

9. Wenn gewünscht, können Sie TENS-Pads an die Anschlussbuchse auf der Vorderseite des Geräts verbinden (NICHT im Lieferumfang)

10. Wenn Sie Muskel- und Gliederschmerzen haben, Befestigen Sie den Hüftgurt an Ihrem Körper (Hüfte, Rücken, Gesäß, Beine). Den Gurt an die Anschlussbuchse auf der Vorderseite des Geräts verbinden (NICHT im Lieferumfang)

11. Nach 30 Minuten wird die Therapie beendet. Schalten Sie das Gerät mit dem roten Netzschalter aus. Ionisator und den Wasserbehälter gründlich waschen und trocknen. Die Trocknung des Ionisator verlängert die Nuzungsdauer.

VORBEREITUNGEN

- 1) Gerät auf eine ebene Oberfläche stellen. (Die beheizbare Hüftgurt) oder die Handschlaufe mit dem Gerät verbinden. Bei diesem Modell nur Handschlaufe.
- 2) Schließen Sie den Netzteilstecker des Gerätes mit Strom.
- 3) Ionisator in das Wasser setzen. Bringen Sie das Armband am Handgelenk an, stellen Sie sicher, dass die Stelle am Handgelenk feucht ist, und auf der Haut liegt.
- 4) Um den entsprechenden Modus zu wählen, drücken Sie das MODE-Feld, und wählen Sie dann direkt den Modus.

Technische Daten

Parametername	Parameter Inhalt
Versorgungsspannung	100-240V 50/60Hz
Nennleistung	12,0W
Strom	2,80-4,00A
Zeitkontrolle / Time	15-30dk.
Spannung Adapters	15V/3A
Verpackung	47×55×31cm

Erklärung der Modefunktion

(+): Positiv (-): negativ

Modus 1: Dieser Modus ist für die meisten Menschen empfohlen.

Mode 2: Für Office-Angestellte

Modus 3: Im Allgemeinen ist es für Frauen empfohlen.

Mode 4: Geeignet für alle Menschen.

Mit den Tasten (-) Zeit (+) können Sie die Zeit einstellen. Eingestellte Zeit ist in der Regel 30 Minuten.

Starten Sie die Reinigung mit der Taste "START".

5) Legen Sie die Füße im Wasser, um die Entgiftung des Körpers zu beginnen.

6) Mit der "STOP" Taste können Sie das Gerät jederzeit ausschalten.

7) In jedem Fall ist die Hygiene sehr wichtig. Legen Sie den Wasserbehälter mit Plasttasche aus (Einige sind im Lieferumfang).

Es wird empfohlen, dass Sie die Elektrode (Ionisator), Wasserbehälter und andere Zubehöerteile mit Handschuhen reinigen. Verhindern Sie direkten Kontakt mit dem Wasser nach der Behandlung.

Farben und Gegenstände im Wasser

Farbe des Wassers	Speicher Ort der Toksine	Grundsymptome
Weißer Schaum	Lymphsystem	Hautallergie, Unregelmäßige Regel
Weiß gepunktet	Enzymstörung, Gärung	Schlafstörung, Verstopfung, Blähung
Gelb Grün	Harnsystem, Nieren	Gynäkologische Erkrankung, Prostata, Ödem
Grün	Galle, Verdauungssystem	Niedrigse Immunsystem
Braun	Leber	Zigarettenkonsum, Fettleibigkeit
Orange	Gelenke	Gelenkinfektionen, Rheuma, Gicht
Rot	Ablagerung in Blutgefäßen	Verengung der Blutgefäße, Bluthochdruck, Gerinnung des Bluts
Schwarz mit Flecken	Hohe Ansammlung von Metall	Diabetes, Herz-Kreislauf Störung

Viele Farben und Objekte erscheinen im Wasser während der Ionenreinigung. Beim Fußbad entsteht eine Reaktion zwischen dem Alkalität oder der Säure der Person, dabei werden Giftstoffe und Partikel im Wasser durch Zugabe mit Salz freigesetzt.

Es ist irrelevant ob die Füße im Wasserbad sind oder nicht, diese Kombinationen verursachen die Verfärbung des Wassers. Die Farbe des Wasser ist auch abhängig vom geographischen Ort.

Wenn Sie das Gerät ohne die Füße einschalten, entsteht auch eine Reaktion. Die Farbe des Wassers ändert sich. Dieses Grundsprinzip sollten Sie genau verstehen.

Wie oben erläutert, ist die Verfärbung des Wassers durch Reaktion zwischen dem Wasser und allen Variablen, die hinzugefügt werden, abhängig.

Diese Farbänderungen hängt vom Wasser des bestimmten geografischen Gebiets, und im Wasser und in der Luft enthaltenen, giftigen und chemischen Komponenten, ab.

Giftstoffe in unserem Körper werden gleich aussehen wie die Giftstoffe, die überwiegend in einem bestimmten Ort sind, jedoch enthält das Wasserbad mit den Füßen viel mehr giftige Partikel im Vergleich.

Die im Wasser befinden Toxoide und die vom Körper absobierte kleberingen Ringe, die normalerweise mit Waschmittel entfernt werden können, haften nicht am Wassebehälter.

Informationen zu den Benutzungsfehlern

- Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und lassen es von der Höhe nicht fallen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einer heißen oder kalten, staubigen oder sehr feuchten Umgebung.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einem starken Magnetfeld.
- Verwenden Sie keine chemischen Lösungen, um das Gerät zu reinigen oder den Rost zu behandeln.

Transport des Geräts

Transportieren Sie Ihr Gerät mit der Originalverpackung. Stoßen Sie das Gerät an Gegenständen nicht an, und lassen es nicht von der Hand fallen.

Für Mensch und Umwelt gefährliche oder schädliche Situation

Es gibt keine schädliche Situation.

Wartungs-, Reparatur- oder Reinigungsinformationen für den Verbraucher

Der Verbraucher braucht keine eigene Reparaturen durchzuführen


Erklärung der mitgelieferten Zubehör






Zusammenhang der Füße mit den Organen:

Fußreflexzonen - rechter Fuß

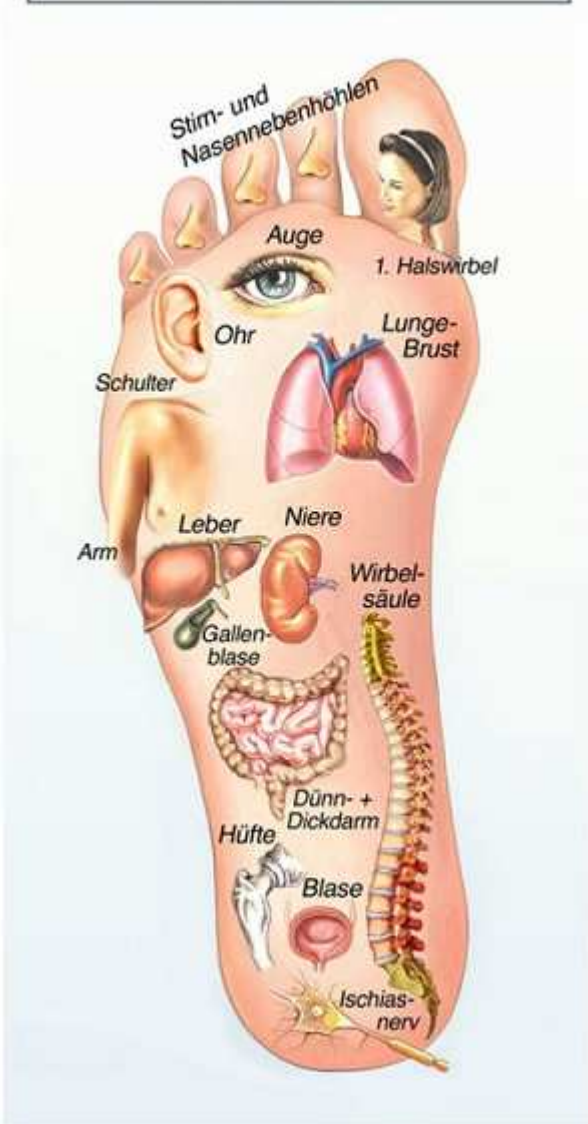

Fußreflexzonen - linker Fuß

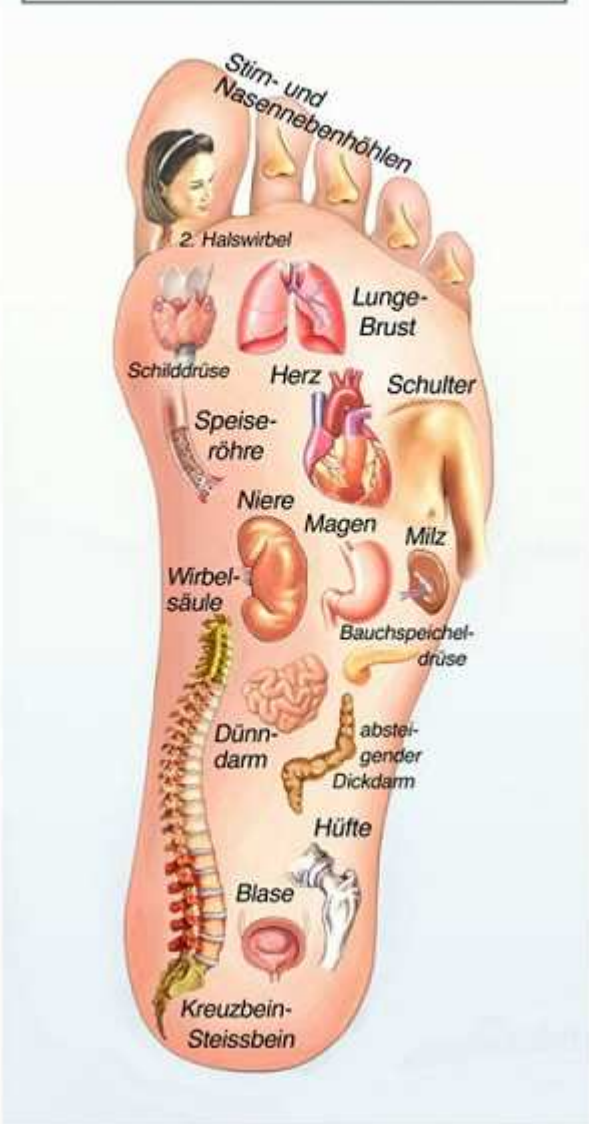

Aussehen des Wassers bei der Behandlung



Kontakt:

ELEKTROPOWER GMBH
GF ERGÜN SENDUR
KORTHOVER WEG 57
45307 ESSEN
TEL: 0201-4389955
FAX: 0201-4389790
MAIL: info@elektropower24.de