

Fuß DETOKS Gerät

MODEL: A-02

Marke: SINICA

Bedienungsanleitung

**NICHT GEEIGNET FÜR
SCHWANGERE UND
PERSONEN, DIE EINEN
HERZSCHRITTMACHER HABEN**

Vorstellung:



In einem mit Wasser befüllten Behälter sollte man die Füße hineinlegen. Dann wählt man am Gerät die Einstellung für wie viele Personen, und schaltet das Gerät ein. Es können zwei Personen gleichzeitig das Gerät benutzen.

Nach einer Weile werden die Füße massiert. Dabei werden die über 4000 vorhandenen Zellwände aktiviert. Die enthaltenen Toxine (Gifte) werden freigesetzt.

In nur 30 Minuten wird der Körper entgiftet.

Bei dieser Methode werden die Toxine, die in den Zellwänden abgesetzt sind, vom Körper entfernt. Wenn man nach den ersten 14 Sitzungen hintereinander diese Therapie durchführt, ist es nützlich drei oder vier Male eine Kur im Jahr durchzuführen. Eine Kur besteht aus 14 Sitzungen hintereinander. Es dürfen am Tag NUR einmal verwendet werden.

Diese Methode wird verwendet, um die körperliche und geistige Energie zu steigern. Dabei wird der Körper entgiftet, die in den Zellen vorhandenen Toxine werden freigesetzt.

1. Sie erreichen ohne Nebenwirkungen eine sichere und wirksame Behandlung.
2. Ihr Stoffwechsel und Immunsystem werden verstärkt. Immunsystem erhöht die Widerstandsfähigkeit des Körpers, wodurch das Risiko von Infektionen gemindert wird. Das Blut kann sich erneuern.
3. Ihr Gedächtnis wird gestärkt, Blasenkontrolle wird erleichtert, der PH-Wert des Körpers ist ausgeglichen. Rückenschmerzen, Rheuma und andere Schmerzen werden gemindert.
4. Blutzucker, Cholesterin und Blutdruck können gesenkt werden. Arthritis, Gicht und Rheumatismus kann leicht nachgewiesen werden.
5. Der Körper kann weniger Wasser ansammeln, somit wird das Gewicht leichter kontrolliert.

Kann Haarausfall reduzieren, helfen Akne und Hautprobleme zu beseitigen.

6. Sie können das Hormonsystem durch negative Ionen auszugleichen, wodurch alle Systeme und Organe normalisiert werden, stellt ein Gesundheitsschild auf.

Kurzanleitung

Anfang einer Detox-Therapie

1. Legen Sie bitte einen Plastikbeutel, wenn möglich, in den Eimer aus, damit Sie den Eimer leichter Säubern können. Befüllen Sie den Eimer mit warmem Wasser bis zu der Ebene des schwarzen Ionisators (Elektrode).

2. Stecken Sie den Stecker des Ionisators (Elektrode) vorne auf den vorgesehenen Steckplatz (rechts außen) auf dem Eimer. Den Ionisator Rohr in den Eimer setzen. Achten Sie darauf, dass die Ionisator-Spule vollständig unter Wasser sich befindet.

3. Verbinden Sie das Netzkabel am Gerät und an der Steckdose.

4. Legen Sie bitte Ihre Füße in das Wasser und schalten das Gerät mit der roten Taste.

5. Drücken Sie die Starttaste und wählen Sie den Modus, die Sie ausführen möchten. Bei der ersten Anwendung können Sie z.B. Nr.: 1 einstellen. Das Gerät zeigt automatisch 30 Minuten die Dauer der Therapie.

6. Sie können die Therapiezeit mit den Tasten - / + einstellen. Die maximale Laufzeit beträgt 60 Minuten. Die empfohlene Erwachsenenzeit beträgt 30 Minuten.

7. Prüfen Sie den Ampere-Wert auf dem Bildschirm. Es sollte nicht unter 2,8 sein. Sie sollten durch Zugabe von Salz (z.B. Meersalz) einen Wert zwischen 2,80 bis 4,00 erreichen.

8. Rühren Sie bei der Einstellung der Stromstärke das Salz mit dem Ionisator im Wasser. Kontrollieren Sie die Amper-Stärke am Display.

Verwenden Sie wenig Salz, damit Sie den Ioninsator für längere Zeit nutzen können.

9. Wenn gewünscht, können Sie TENS-Pads an die Anschlussbuchse auf der Vorderseite des Geräts verbinden (NICHT im Lieferumfang)

10. Wenn Sie Muskel- und Gliederschmerzen haben, Befestigen Sie den Hüftgürtel an Ihrem Körper (Hüfte, Rücken, Gesäß, Beine). Den Gurt an die Anschlussbuchse auf der Vorderseite des Geräts verbinden

11. Nach 30 Minuten wird die Therapie beendet. Schalten Sie das Gerät mit dem roten Netzschalter aus. Ionisator und den Wasserbehälter gründlich waschen und trocknen. Die Trocknung des Ionisators verlängert die Nutzungsdauer.

VORBEREITUNGEN

- 1) Gerät auf eine ebene Oberfläche stellen. Die beheizbare Hüftgürtel oder die Handschlaufe mit dem Gerät verbinden.
- 2) Schließen Sie den Netzteilstecker des Gerätes mit Strom.
- 3) Ionisator in das Wasser setzten. Bringen Sie das Armband am Handgelenk an, stellen Sie sicher, dass die Stelle am Handgelenk feucht ist, und auf der Haut liegt.
- 4) Um den entsprechenden Modus zu wählen, drücken Sie das MODE-Feld, und wählen Sie dann direkt den Modus.

Technische Daten

Parametername	Parameter Inhalt
Versorgungsspannung	100-240V 50/60Hz
Nennleistung	100W
Strom	2,80-4,00A
Zeitkontrolle / Time	15-30dk.
Spannung Adapters	15V/3A
Verpackung	47×55×31cm
Schutz Rang	IP51
Volt	0-36V
Arbeitsbedingung	59 F ~ 86 F
Speicherbedingung	77 F ~185 F

Tastenfunktion

A) Display:



1. Maße des Displays: 10 cm zu 6 cm

2. Es enthält zwei Bambuskohle mit Infrarot-Gürtel um seine Form beizubehalten. Es gibt drei Stufen: niedrig, mittel und hoch. Benutzersysteme: Set-Modi "Gürtel A" oder "B Belt" wird eingestellt. Dieses Zeichen erscheint auf dem Display.



3. Wellenform:

Mod1:



Mode2:



Mode3: 3




Mode4: 4



Mode5:



B) Schalttafel:

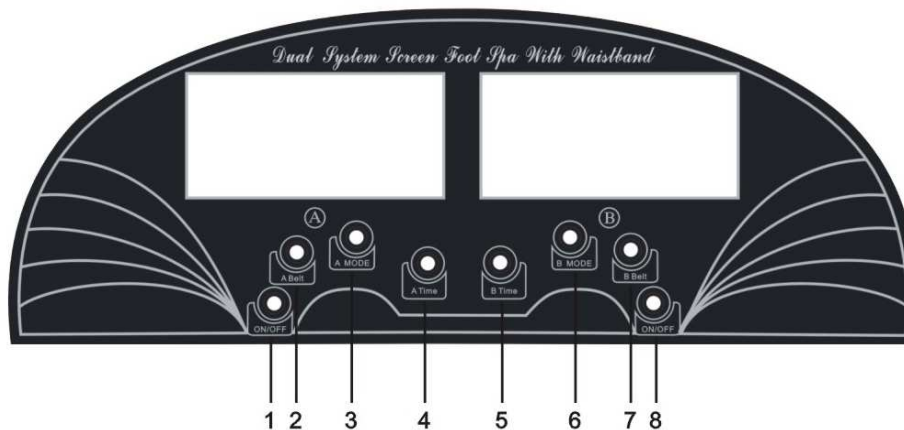

1) Benutzersysteme A Gürtel: Arbeitsmodus

2) Start-Taste (Steuerbenutzersystem A)

3) Betriebsart Kontrolleinstellungen für das Benutzersystem A (Einstellmodus Modus 1, 2 oder 3),

4) Laufzeiteinstellungen für das Benutzersystem A


5) Laufzeiteinstellungen für das Benutzersystem B

6) Betriebsart Kontrolleinstellungen für die Benutzer-System B (Einstellungsmodus 1, 2, oder 3)

7) Start-Taste (Steuerbenutzersystem B)

8) Benutzersysteme B Gürtel: Arbeitsmodus

A = Benutzer 1, B = Benutzer 2

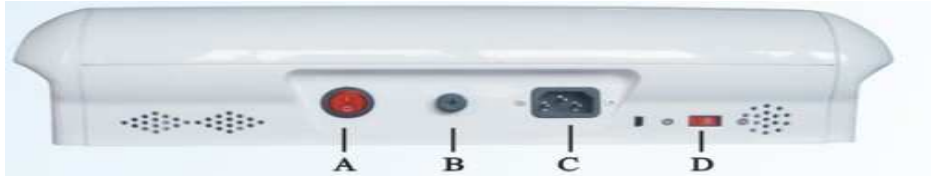

- A: Netzschalter: Ein- und Auschalttaste
- B: Die Sicherung ist in zweifacher Ausführung, eine als Ersatzteil
- C: Netzteil-Stecker
- D: Spannungsschalter (110V-250V)

Steckverbindungen:



- E: Benutzer A Elektrode-Verbindungsstecker (Ionisator)
- F: Benutzer A Armbandstecker
- G: Infrarot-Gürtel Eingangsstecker für den Benutzer A
- H: Infrarot-Gürtel Eingangsstecker für den Benutzer B
- I: Benutzer B Armbandstecker
- J: Benutzer B Elektrode-Verbindungsstecker (Ionisator)

Erklärung der Modelfunktion

(+): Positiv (-): negativ

1) Modus 1: POS70% NEG30%; Strom: 0,7A. (Dies ist ein Entgiftung-Modus eignet sich für den täglichen Gebrauch);

2) Modus 2: PBS30% NEG70%; Strom 0,9 A (ein Behandlung-Modus für die medikamentöse Therapie : Vor Gebrauch ist ein Muskeltest erforderlich);

3) Modus 3: POS50% NEG50%; Strom: 1,1 A (ein Behandlung-Modus für die medikamentöse Therapie : Vor Gebrauch ist ein Muskeltest erforderlich)

4) mode4: POS100% NEG0%: Stromstärke: 1,3 A (für die Verwendung von klinischen Tests);

5) Modus 5: POS0% NEG100%: Strom: 1,5 A (für die Verwendung von klinischen Tests).

Mit den Tasten (-) Zeit (+) können Sie die Zeit einstellen. Eingestellte Zeit ist in der Regel 30 Minuten.

Starten Sie die Reinigung mit der Taste "START".

5) Legen Sie die Füße im Wasser, um die Entgiftung des Körpers zu beginnen.

6) Mit der "STOP" Taste können Sie das Gerät jederzeit ausschalten.

7) In jedem Fall ist die Hygiene sehr wichtig. Legen Sie den Wasserbehälter mit Plastiktasche aus (Müllbeutel etc.)

Es wird empfohlen, dass Sie die Elektrode (Ionisator), Wasserbehälter und andere Zubehörteile mit Handschuhen reinigen. Verhindern Sie direkten Kontakt mit dem Wasser nach der Behandlung.

Farben und Gegenstände im Wasser

Farbe des Wassers	Speicher Ort der Toksine	Grundsymptome
Weißer Schaum	Lymphsystem	Hautallergie, Unregelmäßige Regel
Weiß gepunktet	Enzymstörung, Gärung	Schlafstörung, Verstopfung, Blähung
Gelb Grün	Harnsystem, Nieren	Gynäkologische Erkrankung, Prostata, Ödem
Grün	Galle, Verdauungssystem	Niedrige Immunsystem
Braun	Leber	Zigarettenkonsum, Fettleibigkeit
Orange	Gelenke	Gelenkinfektionen, Rheuma, Gicht
Rot	Ablagerung in Blutgefäßen	Verengung der Blutgefäße, Bluthochdruck, Gerinnung des Bluts
Schwarz mit Flecken	Hohe Ansammlung von Metall	Diabetes, Herz-Kreislauf Störung

Viele Farben und Objekte erscheinen im Wasser während der Ionenreinigung

Beim Fußbad entsteht eine Reaktion zwischen dem Alkalität oder der Säure der Person, dabei werden Giftstoffe und Partikel im Wasser durch Zugabe mit Salz frei gesetzt.

Es ist nicht relevant ob die Füße im Wasserbad sind oder nicht, diese Kombinationen verursachen die Verfärbung des Wassers. Die Farbe des Wassers ist auch abhängig vom geographischen Ort.

Wenn Sie das Gerät ohne die Füße einschalten, entsteht auch eine Reaktion.

Die Farbe des Wassers ändert sich. Dieses Grundprinzip sollten Sie genau verstehen.

Wie oben erläutert, ist die Verfärbung des Wassers durch Reaktion zwischen dem Wasser und allen Variablen, die hinzugefügt werden, abhängig.

Diese Farbänderungen hängt vom Wasser des bestimmten geografischen Gebiets, und im Wasser und in der Luft enthaltenen, giftigen und chemischen Komponenten, ab.

Giftstoffe in unserem Körper werden gleich aussehen wie die Giftstoffe, die überwiegend in

einem bestimmten Ort sind, jedoch enthält das Wasserbad mit den Füßen viel mehr giftige Partikel im Vergleich.

Die im Wasser befindlichen Toxine und die vom Körper absorbierten, klebrigen Ringe, die normalerweise mit Waschmittel entfernt werden können, haften nicht am Wasserbehälter.

Informationen zu den Benutzungsfehlern

- Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und lassen es von der Höhe nicht fallen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einer heißen oder kalten, staubigen oder sehr feuchten Umgebung.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einem starken Magnetfeld.
- Verwenden Sie keine chemischen Lösungen, um das Gerät zu reinigen oder den Rost zu behandeln.

Transport des Geräts

Transportieren Sie Ihr Gerät mit der Originalverpackung. Stoßen Sie das Gerät an Gegenständen nicht an, und lassen es nicht von der Hand fallen.

Für Mensch und Umwelt gefährliche oder schädliche Situation

Es gibt keine schädliche Situation.

Wartungs-, Reparatur- oder Reinigungsinformationen für den Verbraucher

Der Verbraucher braucht keine eigenen Reparaturen durchzuführen

Erklärung des mitgelieferten Zubehörs





**Elektrod-Stab/
Ionen-Stab**



**Arm- & Handband
Beinband**




**Gürtelband /
Hüftgurt**



Zusammenhang der Füße mit den Organen:

Fußreflexzonen - rechter Fuß

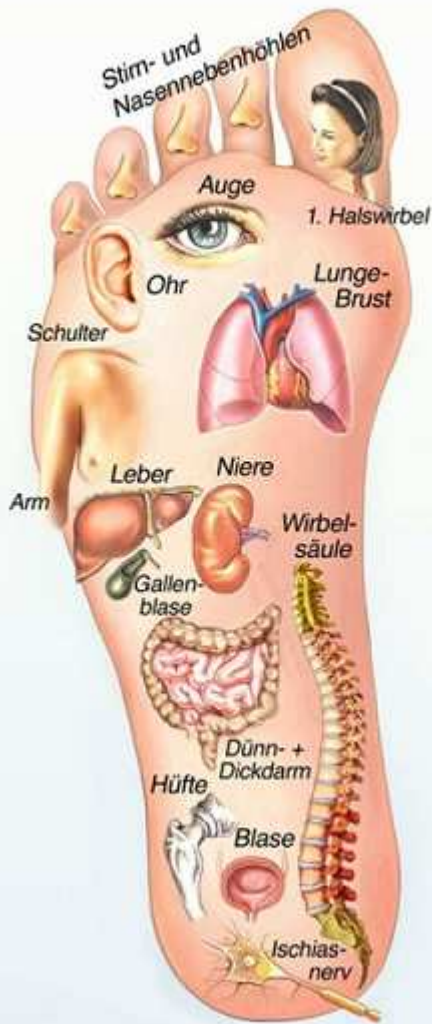

Fußreflexzonen - linker Fuß



Aussehen des Wassers bei der Behandlung



Kontakt:

ELEKTROPOWER GMBH
GF ERGÜN SENDUR

KORTHOVER WEG 57
45307 ESSEN

TEL: 0201-4389955

FAX: 0201-4389790

MAIL: info@elektropower24.de